




YUWELL BREATHCARE II



Ürün Sayfası

CPAP/AUTOCPAP/BPAP/BPAP-ST/VGPS

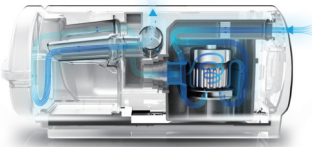


Yeni Havayolu Tasarımı

Akışkanlar mekaniğine uygun yeni havayolu tasarımıyla hava kanalı performansı artarken, tüm cihazın akış hızında %20 artış, empedansta ise %10 düşüş görülür. Böylece kullanıcı daha çok ve daha rahat hava solur, konfor sağlanır.



Manyetik Alan Oryantasyon Kontrol Sistemi

Geliştirilmiş motorlu kontrol sistemi aralıksız hız değişimi sağlar, solunum basıncına hızlı tepki verir ve gerçek zamanlı hava kaçak telafisi yapar.

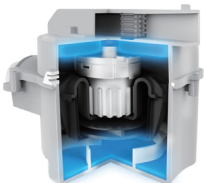

Akustik Gürültüyü Azaltan Tasarım

Ses ayarlaması teknolojisiyle frekanslı gürültüler insan kulağının duyamayacağı ses frekanslarına ayarlanmaktadır. Diğer yandan motor şok emici bir yapıyla sarılmıştır ve çok sayıda akustik materyal sesi daha da azaltmak için titreşimi emmektedir.

Yuwell BreathCare PAP / Ürün Parametreleri

Özellik	BreathCare PAP II				
Resim	 				
Renk	Beyaz	Siyah	Siyah	Beyaz	Beyaz
Model	YH-450	YH-480	YH-820	YH-825	YH-830
Mod	CPAP, Auto Cpap	CPAP, Auto Cpap	CPAP, S, T, ST, VGPS	CPAP, S, T, ST, VGPS	CPAP, S, T, ST, VGPS
Basınç	4-20cmH2O	4-20cmH2O	4-20cmH2O	4-25cmH2O	4-30cmH2O
Etkin Nemlendirici	●	●	●	●	●
Akıllı Start/Stop	●	●	×	×	×
FPS-Tech	●	●	×	×	×
Yüksek Basınç Hatırlatıcı	×	×	●	●	●
Kaçak Hatırlatıcı	●	●	●	●	●
Boğulma Hatırlatıcı	×	×	●	●	●
Tetik Ayarı	×	×	●	●	●
Döngü Ayarı	×	×	●	●	●
Eğim Ayarı	×	×	●	●	●
Tidal Hacim Ayarı	×	×	●	●	●
İrtifa Ayarı	●	●	●	●	●
Kaçak Telifisi	●	●	●	●	●
Veri Yönetimi	●	●	●	●	●
Merkezi Apne Tespiti	●	●	×	×	×
Akıllı Nemlendirme	●	●	●	●	●
Brüt A. / Net A.	4,5kg / 2,4kg				
Ambalaj	1SET/KT 48,5x32,5x21,5cm				



YUWELL BREATHCARE II



Ürün Sayfası

Bilgi Aktarım Cihazı



Yuwell Hasta Yönetim Sistemi


Uykuda solunum bozukluğu yaşayan hastaların yönetimi için kusursuz, güvenli, bulut tabanlı bir sistemdir. Masanızdan kalkmadan hastalarınızın cihazını uzaktan gözetlemenizi mümkün kılar. İş akışlarının basitleştirilmesini ve hasta bakım ağı üzerinde daha etkin iş birliği yapılmasını sağlar.

Kablosuz bağlantı YH-350, YH-550, YH-48 ve YH-830 serilerinde bulunmaktadır.



WiFi

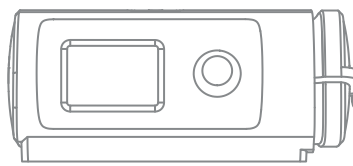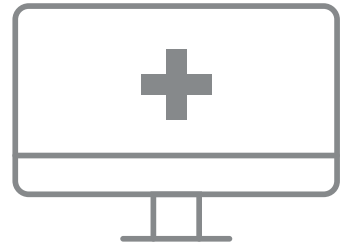

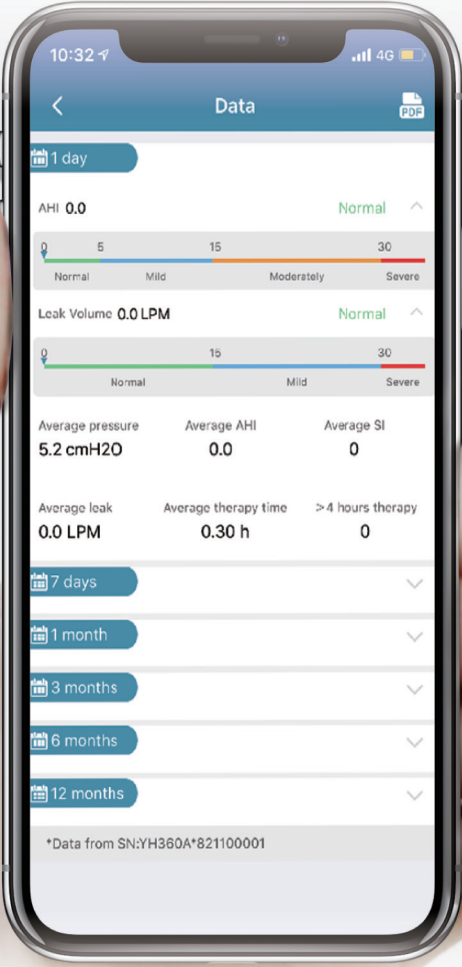

Akıllı Veri Yönetimi

Her gece kullanımının ardından oluşturulan QR kodla, Breathcare+ uygulaması sayesinde kullanım verileri kolayca yönetilir ve yorumlanır. İndirmek için Google Play Store veya Appstore'da Breathcare+ adıyla arayabilirsiniz.

